



ChemoDrip

Sistemi per la somministrazione
di farmaci chemioterapici

Infusion sets for the administration
of chemotherapy drugs



Al fine di garantire la più totale sicurezza e semplicità di utilizzo durante l'infusione di farmaci chemioterapici, Aries ha sviluppato "ChemoDrip", un set d'infusione a circuito chiuso completo, che permette la somministrazione di più farmaci contemporaneamente, garantendo in ogni momento la sterilità del prodotto.

Aries has created "ChemoDrip" a complete I.V. closed circuit, in order to guarantee the complete safety for personnel and patient during infusion of chemotherapy drugs. This set allows the infusion of several chemotherapy drugs at the same time, saving the sterility of the fluid path.

Materiali / Materials

I materiali di fabbricazione clinicamente testati* sono idonei per l'infusione dei farmaci chemioterapici in uso.

Clinically tested materials* compatible with chemotherapy drugs.



Gocciolatori / Drip Chamber

È disponibile una gamma completa di nuove camere di gocciolamento con lo scopo di agevolare le procedure di somministrazione adottate nei singoli ospedali


A new complete range of drip chambers studied and realized to help personnel during infusion procedures.



Nuovi perforatori / New Spikes

Una nuova gamma di perforatori brevettati, è stata progettata e realizzata per ottenere una sicura connessione alle sacche e ai flaconi di uso comune nella preparazione e infusione dei farmaci.


A new patented range of spikes studied and realized to have a safety connection to bags and vials during preparation and infusion of drugs.

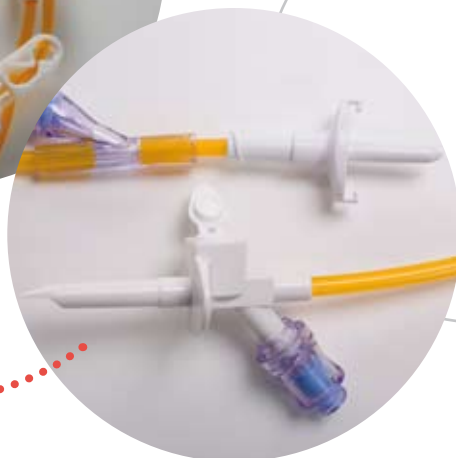

Valvole / Valves

Le valvole di sicurezza presenti sul sistema consentono la connessione ai flaconi o alle sacche dei farmaci chemioterapici senza rischi di contaminazione. Garantiscono inoltre il completo circuito chiuso del sistema evitando possibili reflussi accidentali durante la somministrazione del farmaco.

The safety in line valves allow connection with bags and vials without any risk of contamination. They allow the complete closed circuit avoiding any possible back flow during administration of drugs.

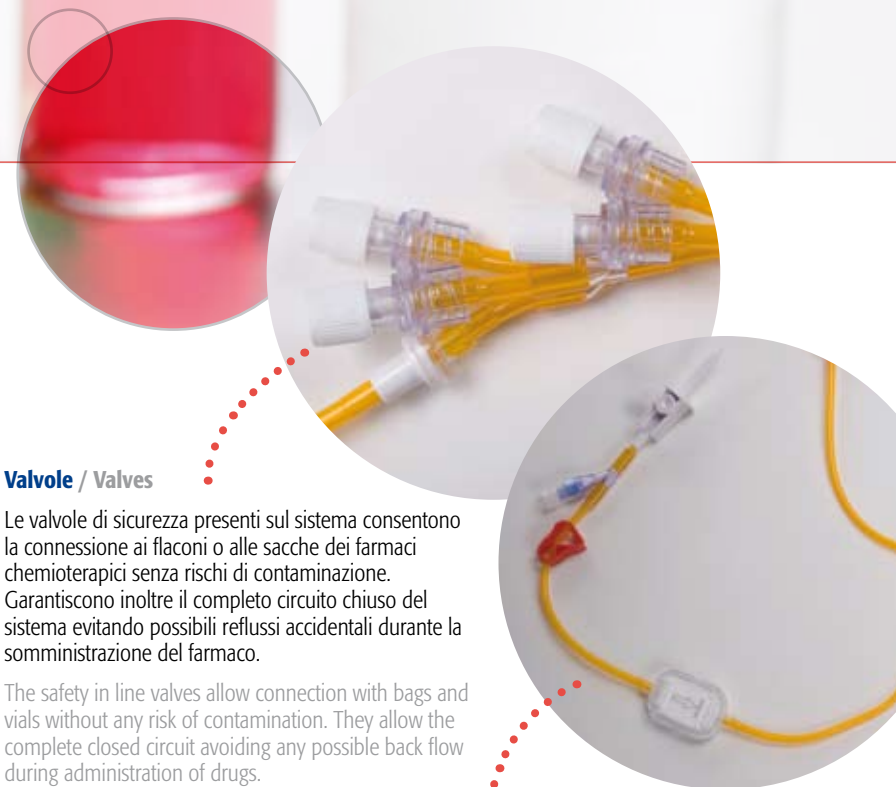

Connettori / Connect sets

I set di connessione tra linea centrale e flaconi/sacche sono fabbricati con materiali testati* e corredati di perforatori di nuova progettazione realizzati per ottenere connessioni agevoli e sicure con sacche o flaconi. La possibilità di inserire un filtro da 0,2 micron, rende il sistema indicato per la somministrazione di "TAXOL" e di tutti i farmaci chemioterapici per i quali sono prescritti apparati aventi le stesse caratteristiche.

The connect sets between main set and bags/vials are produced with tested materials* and new patented spikes studied and realized in order to have easy and safety connection. The possibility to insert 0,2 micron in line filter, makes this set available for administration of "TAXOL" and for all those chemotherapy drugs which require the same material's characteristics.